

**Cánula metálica fenestrada:** uso habitual en laringectomía parcial. Si se tapa permite fonación. Se puede usar mucho tiempo siempre que se haga un correcto mantenimiento y limpieza. Ver enlace en Wellpath (usar buscador)



Cánula externa e interna



Cánula externa larga y corta

**Cánulas metálicas:** diversos modelos



Minicánula de coniotomía, fenestradas, sin fenestrar, infantil

**Coniotomo con minicánula y capuchón protector.** Para hacer punción en la membrana cricotiroides. Minicánula. Ver enlace en Wellpath (usar buscador)



**Cánula metálica con apósito y cinta.** La parte plástica del apósito hacia fuera y la acolchada hacia adentro. La cinta pasa a través de los orificios laterales de la cánula. Se anuda al cuello siempre con un lazo



**Cánula de silicona larga (Moore)**, fiador y cánulas internas. Se usa en caso de estenosis traqueal. Traumatiza muy poco la tráquea. Uso limitado en el tiempo




**Cánula de plástico (Shiley)** con fiador, cánulas internas y cinta. Suele ser de uso hospitalario. Uso limitado. Es dura. Permite adaptar toma de aire, oxígeno, intubación.



**Cánula corta de silicona (Provox), filtros y apósito.** El sistema Provox permite utilizar una prótesis fonatoria. La cánula es corta de silicona blanda. Se puede usar durante bastante tiempo. La cánula y el apósito adaptan los filtros



## Prótesis fonatoria. Sistema de colocación y cepillo de limpieza

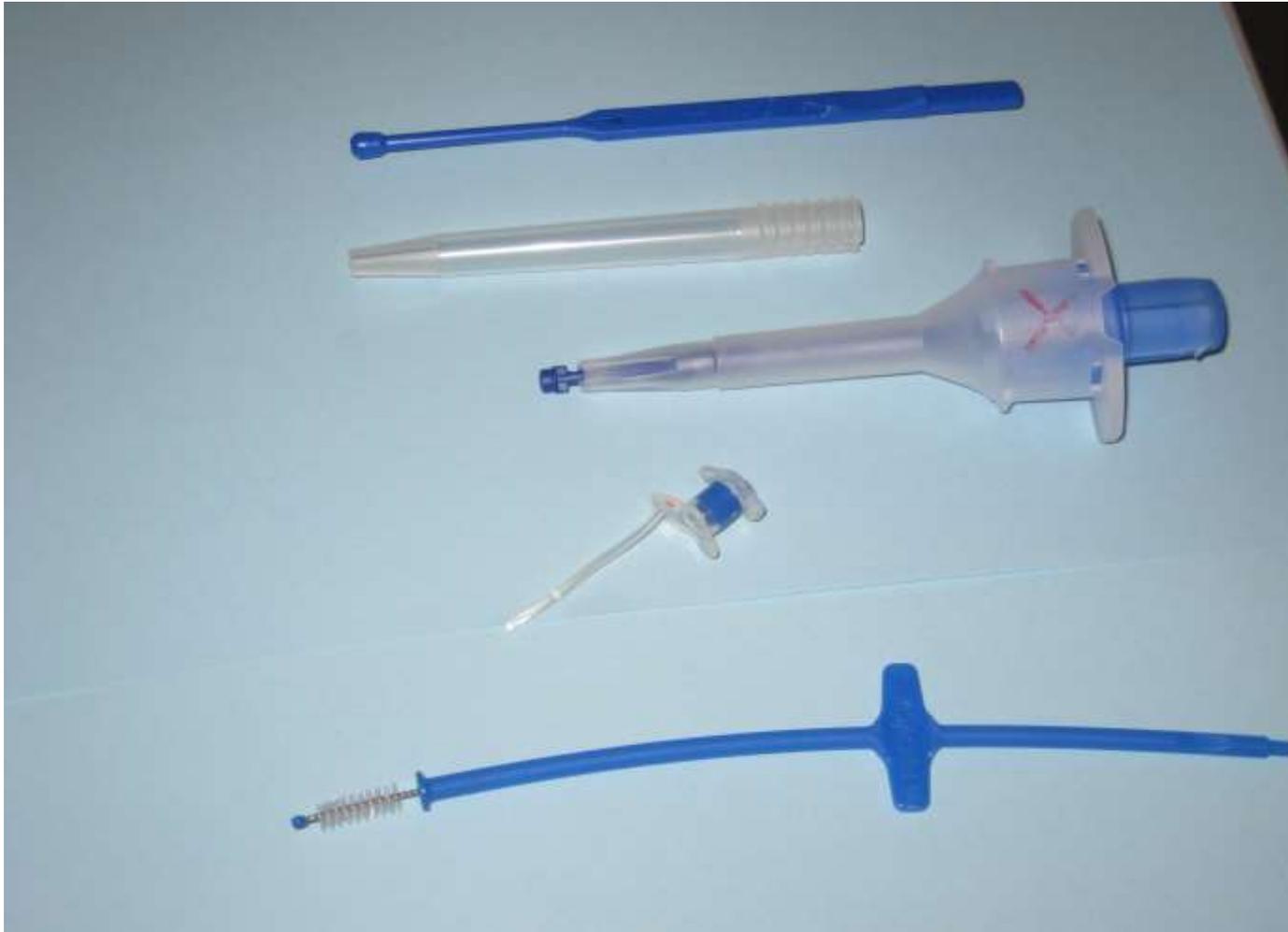

**Cánula anillada** (traqueoflex) con balón, fiador y cinta. Se usa en postoperatorio inmediato



**Cánulas cortas de silicona (Montgomery), tapones de cierre.** Se usan antes de la decanulación



**Cánula de plástico**, cánula interna, adaptador, válvula de cierre y cinta (Rüsch). Uso ambulatorio u hospital. Permite adaptar ventilación, oxígeno




**Cánula de plástico con balón, fiador y cinta (Shiley).** Posopertorio inmediato y UVI. Permite adaptar ventilador, oxígeno.



**Cánula corta** de silicona y cinta. Uso ambulatorio. Es blanda



## Tapones para cerrar cánulas

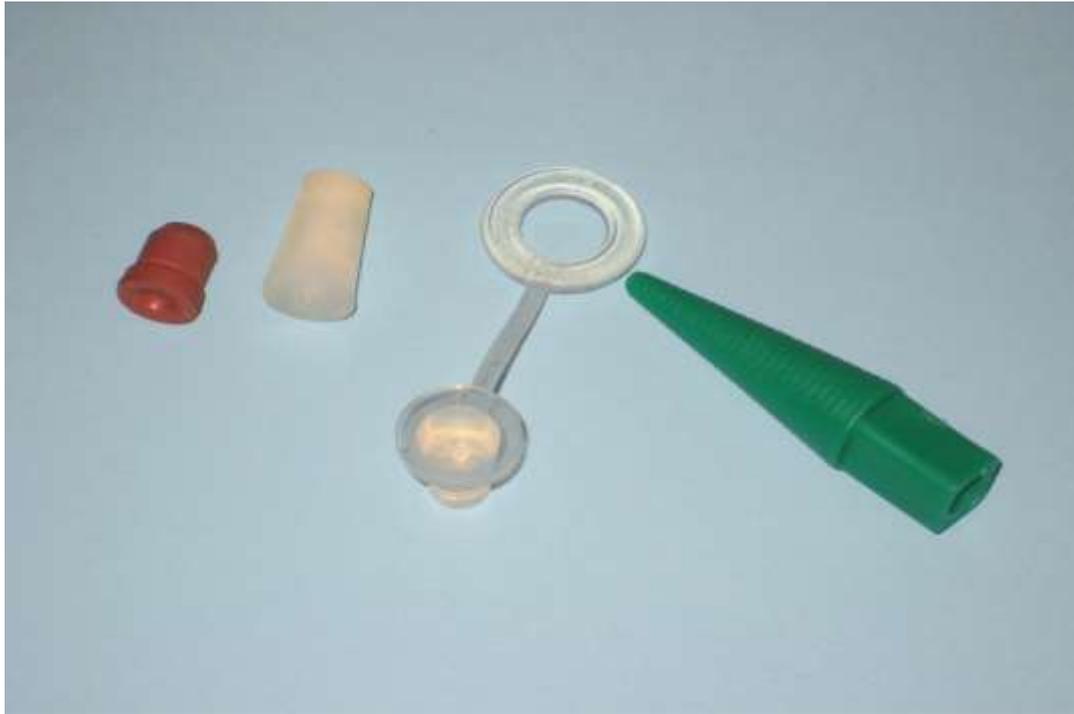

**Cánula metálica**, cánula interna y fiador. Uso habitual en laringectomía total. Se puede usar mucho tiempo siempre que se haga un correcto mantenimiento y limpieza. Ver enlace en Wellpath (usar buscador)



**Bypass salival** de Montgomery. Permite que la saliva pase desde la faringe al esófago. El extremo ancho se coloca en faringe. Es de silicona blanda.  
Distintos diámetros.

